

X5

TEMP

TERMOMETRO DIGITALE

74 *vio*

GARANZIA

3

ANNI

- 4 Ingressi PT 100
- Misura al centesimo di °C
- Display 4", a colori e ad alta definizione
- Schermata Multiview
- Datalogger (190.000 dati) - 3 modalità
- Data Logger programmato
- Password protezione dati e calibrazione
- ID Sonda
- Sonda di riferimento
- Allarmi
- Multilingua (ITA - ENG - FR - DE - ESP)



MISURA BRILLANTE!



Il nuovo display TFT grafico a colori permette la lettura delle misure in qualsiasi condizioni di luminosità. All'interno o sul campo, al buio o sotto al sole la lettura sarà sempre chiara.

Il tema chiaro o scuro ti permetteranno di personalizzare lo strumento a piacimento.



1..2...3...4 INGRESSI PT100!

Fino a 4 misure contemporanee con il massimo della precisione.

Anche la calibrazione delle 4 catene di misura è completamente autonoma, garantendo il massimo della flessibilità.



Temp 74 viene fornito in una comoda valigia, robusta e pensata per contenere tutti gli accessori necessari.

NUOVE FUNZIONI

ID :

puoi inserire un identificativo per ogni canale di misura.

Sonda di riferimento:

sarà facilissimo confrontare le varie misure!

Password:

proteggi memoria, calibrazioni e impostazioni.

Allarmi:

abilita una soglia minima e una soglia massima. Se la temperatura sconfinerà verrai avvisato immediatamente.

#organizzazione

#velocità

#sicurezza

#qualità




Manuale

Clicca e salva!



Automatico

Il logger salva i dati autonomamente con una frequenza prestabilita. E' possibile inserire un ritardo alla partenza.

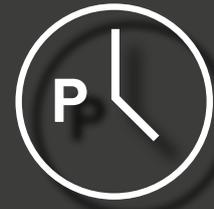

Programmato

Imposta data di inizio, fine e frequenza dei salvataggi. Potrai andare in vacanza tranquillo!

MEMORIA INFINITA

Più di 190.000 dati memorizzabili rendono Temp 74 un vero e proprio datalogger. Anche le analisi più lunghe potranno essere memorizzate senza difficoltà.

DATALINK+

Il software gratuito DataLink+, disponibile sul sito www.giorgiobormac.com, permette di organizzare e esportare i dati in formato .pdf ed .xls.

Sfruttando la memoria del computer il salvataggio dei dati diverrà infinito, e tutte le visualizzazioni possibili sullo strumento diverranno fruibili dal software.

SUPPORTO

magnetico e con lacci a strap, con portasonde. Avrai sempre le mani libere.



#	Data	Ora	Valore	U.M.	Modo	Temp	U.M.	MTC/ATC
1	18/05/2023	10:49:58	21,54	°C	CH1	21,54	°C	ATC
1	18/05/2023	10:49:58	21,51	°C	CH2	21,51	°C	ATC
1	18/05/2023	10:49:58	21,15	°C	CH3	21,15	°C	ATC
1	18/05/2023	10:49:58	20,98	°C	CH4	20,98	°C	ATC
2	18/05/2023	10:50:01	21,54	°C	CH1	21,54	°C	ATC
2	18/05/2023	10:50:01	21,51	°C	CH2	21,51	°C	ATC
2	18/05/2023	10:50:01	21,15	°C	CH3	21,15	°C	ATC
2	18/05/2023	10:50:01	20,98	°C	CH4	20,98	°C	ATC

SCHEDA TECNICA

GARANZIA
3
ANNI



Campo di misura	-200,00 ... +999,00 °C
Risoluzione	0,01 °C / 0,1 °C / 1 °C selezionabile
Accuratezza	± 0,1 °C (-200,0 ... -100,0 °C) ± 0,03 °C (-99,99 ... +99,99 °C) ± 0,1 °C (+100,0 ... +999,9 °C)
Data logger	Manuale, automatico, programmato
Memoria	190.000 dati nella memoria interna
Indicatore stabilità	Si - 3 livelli
Ingressi	4 PT100
Display	TFT ad alta definizione, a colori. 4 pollici
Multilingua	ITA - ENG - ESP- FR- DE
Luminosità e contrasto	Automatica e manuale (sensore di luminosità integrato)
Alimentazione	Batterie AA 4 x 1,5 V Rete 110/220 V (alimentatore integrato)
Unità di misura	°C - °F
Funzioni extra	Min - Max Hold Allarmi (segnale acustico e visivo) Sonda di riferimento ID sonde Password protezione cal e dati
Autospegnimento	Dopo 20 minuti, disattivabile
Calibrazione	Canale singolo o multicanale, con richiamo dati
Dimensioni	184 x 85 x 45 mm
Peso	0.4 Kg
Garanzia	3 anni
Codice	50111212



Temp74_Ita_05/23_v1.0_DV

Distribuito da

